



## ➤ DomeLUX 7272

Lámpara de cirugía quirúrgica TRIDENT DOMELUX  
Luminancia de 160.000/160.000 lux por satélite.  
Sistema de control digital en cada satélite.  
Lámpara de Luz Fria  
Rotación de 360°.

## DomeLUX 7272 ◀

## Especificaciones Técnicas

Características	Satélite 1	Satélite 2
Luz diámetro de la cabeza (cm)	71.5	71.5
Diámetro del reflector (cm)	62	62
Número máximo de intensidad a 1 m (CE) (Lux)	160.000	160.000
Temp. (K)	4200+/-200	4200+/-200
Índice de Redirección de color (Ra)	95	95
Absorción de infrarrojos	99%	99%
Diámetro de campo (cm)	10-30	10-30
Profundidad del volumen de la luz L1 + L2 (cm)	120	120
Total de irradiación	350w/m2 (2.8mw/m2lx)	350w/m2 (2.8mw/m2lx)
Peso del satélite (lb / kg)	36.37 lb/ 16.5 kg	36.37 lb/ 16.5 kg
Número de bombilla	2 (1 primaria & 1 back-up)	2 (1 primaria & 1 back-up)
Spec bombilla. (VCC / W)	22.8/150	22.8/150
Bombilla de vida (horas)	1000 + horas	1000 + horas
Volt. Requerido (VAC)	100-240	100-240
Altura mínima del techo para instalación (cm)	270	270




### Manija de maniobra esterilizable

De fácil agarre y corto alcance para maniobras. Pulsando el botón este se libera y permite ser remplazado.



### Fácil sustitución Bombillo

Su diseño sin herramientas permite cambiar la bombilla en cuestión de segundos.

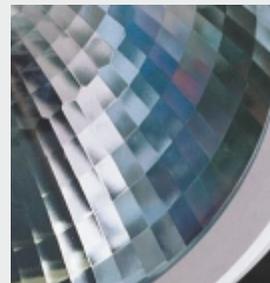

### Reflector multi-faceta

Trident reflector multi-faceta está compuesta de 1.980 reflectores individuales para agrupar y concentrar la luz a (1M) distancia desde el cabezal de la lámpara 7272, y proyectan la luz en la profundidad de campo.



### Mayor penetración de la luz

La "columna de luz" ofrece una distribución lúminica uniforme y homogénea, optimizando la profundidad focal de la luz.

comercial@procesosbiomedicos.com  
Tel: (4) 448-8984  
Cel: 314-5085483